


Führerschein-Sehtestgerät **bon FT-2**

Geeignet für die Klassen: A, A1, A2, B, BE, AM, L und T.

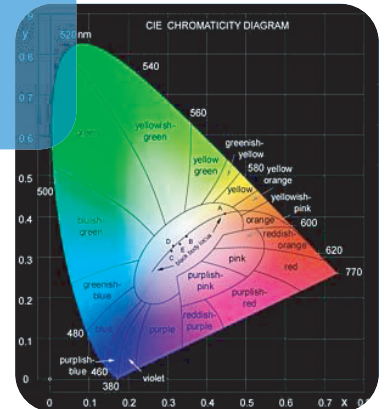

Sehtestgerät bon FT-2

für den Straßenverkehrs-Sehtest nach DIN 58220, Teil 6




Führerschein-Sehtestgerät bon FT-2

- speziell entwickelt für straßenverkehrs-bezogene Sehprüfungen gemäß DIN 58220, Teil 6
- geeignet für die deutschen Fahrerlaubnisklassen
A, A1, A2, B, BE, AM, L und T
- besonders leichte Bedienung
- robust und langlebig

- Lieferumfang
 - Grundgerät mit integrierter Testscheibe und Akku
 - Staubschutzhaube
 - Netzteil
 - Leitkarte
 - Testformulare


- Elektrik 12 V / 1,5 VA
- Maße (mm) 268 (B) x 297 (T) x 507 (H)
- Gewicht ca. 9,5 kg

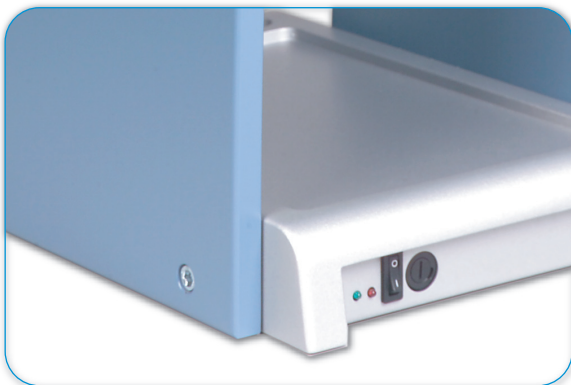

Das **bon FT-2** besitzt einen integrierten Akku, der bis zu 75 Stunden mobilen, netzunabhängigen Betrieb gewährleistet. Eine LED informiert Sie über den Ladezustand des Akkus.



In den praktischen Ablagefächern haben Sie Leitkarte und Schreibgerät immer griffbereit.

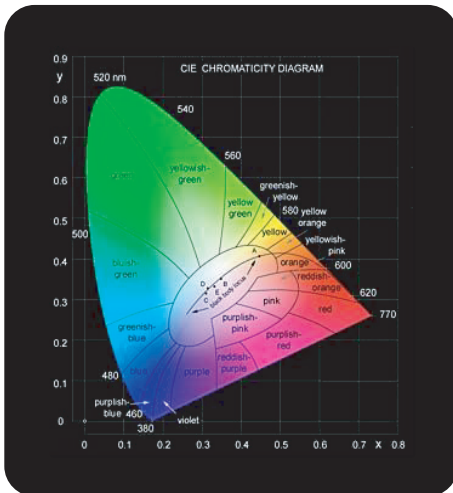

Das **bon FT-2** arbeitet mit sehr hochwertigen und farblich speziell selektierten, weißen Lumineszenzdioden (LED). Diese Beleuchtung bietet den höchsten Industriestandard und damit viele Vorteile gegenüber herkömmlichen Leuchtmitteln:

- konstante Helligkeit und Farbreinheit über die gesamte Betriebsdauer
- garantierte Betriebsdauer von 100.000 Stunden
- geringere Wartungskosten, da kein Wechsel des Leuchtmittels nötig wird
- äußerst geringe Wärmeentwicklung
- keine mechanischen Empfindlichkeiten



Die Farbkombination des **bon FT-2** ist standardmäßig RAL 9006 Weißaluminium und RAL 5014 Taubenblau.

Die Seitenteile sind gegen einen kleinen Aufpreis in allen Farben gemäß RAL-Farbkarte erhältlich.


Als optionales Zubehör für das **bon FT-2** ist ein stabiler Koffer erhältlich. Damit transportieren Sie Ihr Sehtestgerät garantiert sicher zum nächsten Einsatzort.



Testfelder des bon FT-2 für den Straßenverkehrs-Sehtest gemäß DIN 58220, Teil 6


Test 1
R

Visus 0,32
Visus 0,7
Visus 1,0

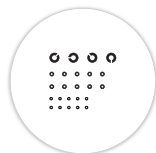


Test 2
L

Visus 0,32
Visus 0,7
Visus 1,0

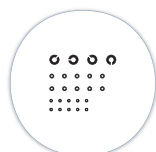

Test 3
BIN


Visus 0,32
Visus 0,7
Visus 1,0

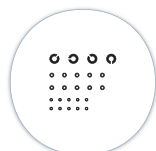

Wiederholung mit neuer Orientierung der Landoltringe:


Test 10
R

Visus 0,32
Visus 0,7
Visus 1,0

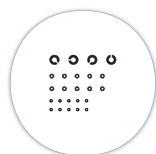


Test 11
L

Visus 0,32
Visus 0,7
Visus 1,0

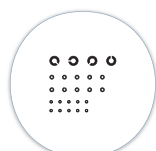

Test 12
BIN

Visus 0,32
Visus 0,7
Visus 1,0

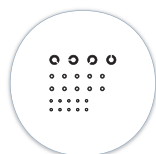

Zusätzliche Sehteste

Sehgleichgewicht

Test 4



Phorieprüfung horizontal

Test 5



Phorieprüfung vertikal


Test 6



Stereosehen

Test 7

Stereogrenzwinkel
400"
200"
100"
60"

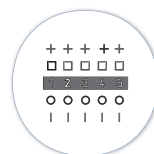

Blendempfindlichkeit

Test 8
BIN

Visus 0,25 / 0,5
Visus 0,8 / 1,0



Visusprüfung mit Ziffern

Test 9
BIN

Visus 0,5
Visus 0,63
Visus 0,8
Visus 1,0
Visus 1,25

