


Sehzeichendisplay

Rexxam LCD-1000P

mit allen Standardtests für die tägliche Refraktion.

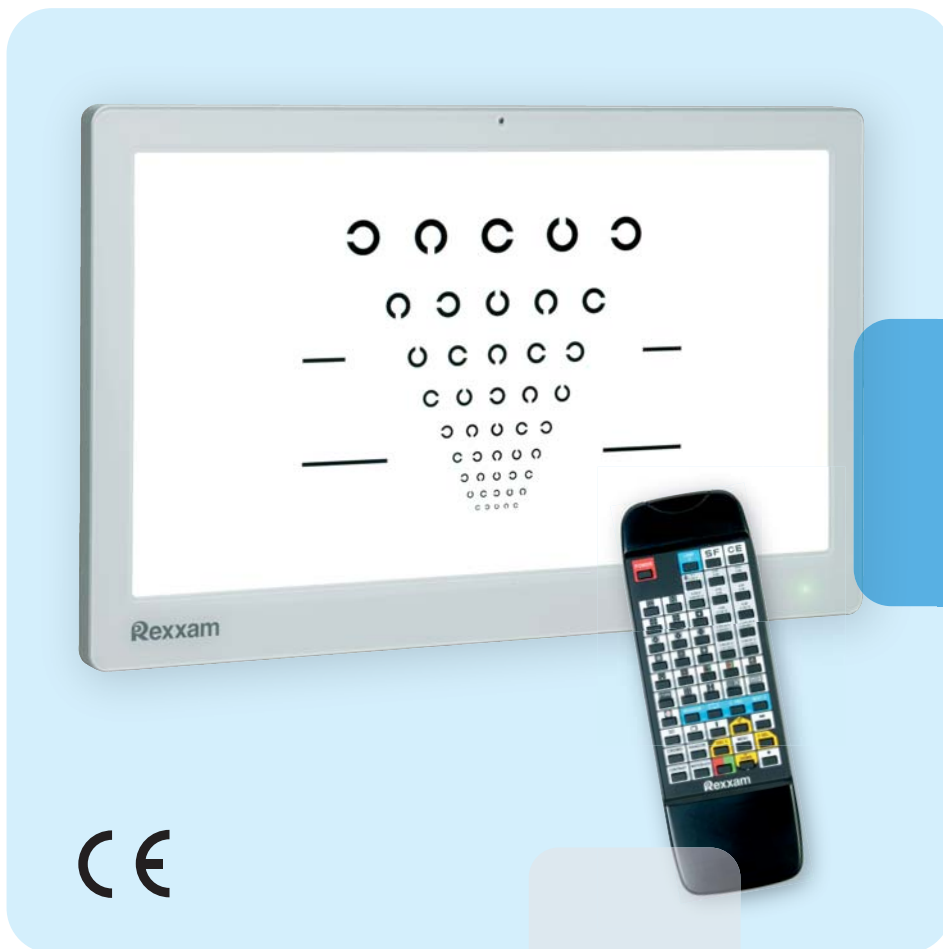

CE

Rexxam
Quality in vision care

Proudly  Made in Japan



bon


Sehzeichensystem Rexxam LCD-1000P

großzügiges 24 Zoll Display

DIN/ISO-konforme Testfelder
(gutachtentauglich)

leichte, schnelle Bedienung

alternativ auch ohne
polarisierte Binokularteste
erhältlich (Modell LCD-1000)

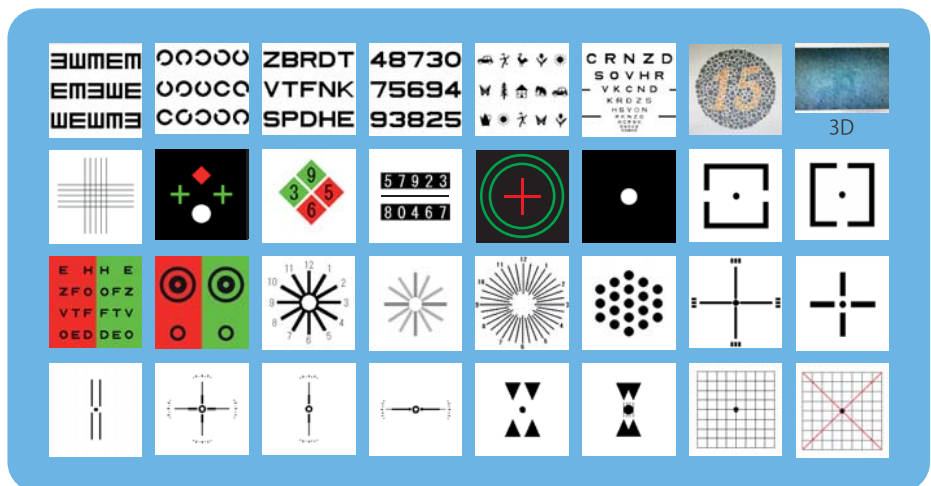

Technische Details

Monitortyp	24 Zoll Full-HD LED Backlight, zirkular polarisiert
Teste & Optotypen	Landoltringe, logarithmisch gestuft entsprechend ISO 8596 und DIN 58220 Teil 3 (Gutachtentauglichkeit), E-Haken (Snellen), Zahlen, Buchstaben, Kinderbilder, Stereoteste, Kontrasttest, Farbttest, Maddox u.a.
Maskierung	einzelne Optotypen, horizontale Reihe, vertikale Spalte
Filter	Rot/Grün und zirkular polarisiert
Sonderfunktionen	Direkt- oder gespiegelte Darstellung, Kontrastveränderung, Schwarz/Weiß invertiert, zufällige Wiedergabe, Crowd-Test
Testabstand	1 m ~ 8,0 m, einstellbar in 25 cm Schritten ¹
Konnektivität	koppelbar und simultan bedienbar mit dem automatischen Phoropter Rexxam DR-900
Steuerung	per drahtloser IR Fernbedienung (4 Kanäle schaltbar) oder über den automatischen Phoropter DR-900
Bildschirmschoner	Bildschirm aus oder Diashow, automatisch nach 5, 10 oder 30 Minuten
Energieversorgung	Anschluß: 100~240 V, Leistungsaufnahme: 70 VA Spannungsversorgung: DC 12 V / 3,4 A
Abmessungen und Gewichte	Display: 571(B) x 347(H) x 48(T) mm, 4,3 kg Fernbedienung: 64(B) x 195(H) x 20(T) mm, 140 g
Standard Zubehör	Wandbefestigung, Polarisations-Brille (zirkular), Rot/Grün-Vorhalter, IR Fernbedienung, Batterien (2x AA 1,5V), Netzgerät, Netz-Anschlusskabel

■ Rexxam Co., Ltd., 958 Ikeuchi, Konan-cho, Takamatsu-city, Kagawa 761-1494, Japan

¹ Aufgrund natürlicher physikalischer Limitationen können einige Sehzeichen bei extrem großen Entfernungen nicht vollständig dargestellt werden.

Rev. 2022-07-12

bon Optic Vertriebsgesellschaft mbH

Stellmacherstr. 14 · 23556 Lübeck · Telefon 0451 - 80 9000
Fax 0451 - 80 900-10 · E-Mail call@bon.de · Internet www.bon.de

bon