


klassische und digitale Spaltlampen

hervorragende Optik und helle, langlebige LED-Beleuchtung

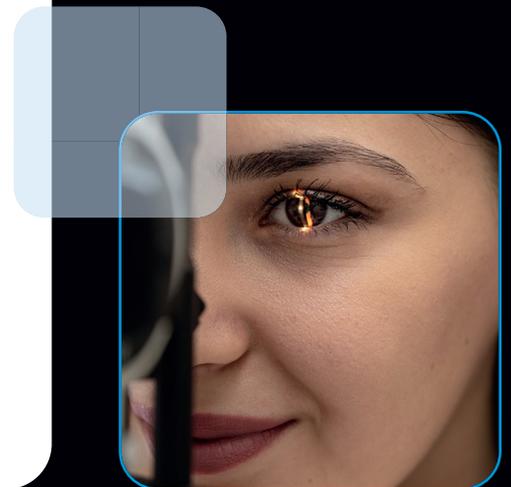

Spaltlampen SL-85V / SL-75V / SL-99K Elite

Das richtige Werkzeug für jeden professionellen Anwender.



Eine Spaltlampe von bon - die richtige Wahl.

Ihre hervorragenden hochauflösenden Optiken überzeugen seit Jahrzehnten tausende Anwender weltweit.

Die moderne LED Beleuchtung stellt den aktuellen Stand der Technik dar. Sie sorgt für perfektes Licht bei jeder Untersuchung und spart zudem Energie. Die LEDs versprechen eine Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden. Sie gewährleisten bei jeder Beleuchtungsstärke eine hervorragende Farbwiedergabe. Die Helligkeit regeln Sie ganz bequem direkt an der Spaltlampenbasis.

Die bewährte Einhandbedienung erleichtert das Arbeiten. Sie bewegen die Spaltlampe damit schnell und präzise in den drei Koordinaten.


Die Möglichkeit der Spaltentkopplung (nur SL-75 / SL-99K Elite) und der integrierte Gelbfilter erweitern die diagnostischen Möglichkeiten.

DIN EN ISO 13485 zertifizierte Qualität

Alle Modelle werden in der EU vom größten Spaltlampenhersteller der Welt speziell für bon hergestellt. Sie wurden nach den höchsten europäischen Standards entwickelt.

Ihr ergonomisches Design, die hochwertige Optik und die leichtgängige Präzisionsmechanik bieten ein einzigartiges Erlebnis bei jeder Spaltlampenuntersuchung.

Sie garantieren einen hohen technischen Standard und eignen sich für alle Untersuchungen am Auge, selbst für anspruchsvolle Endothelbetrachtungen ohne zusätzliche Lichtquelle.

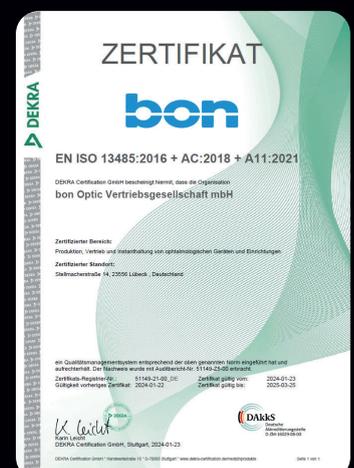



bon SL-85 V

Diese Spaltlampe in Z-Typ Ausführung (Beleuchtung von unten) bietet eine helle LED Beleuchtung und einen 5-fach Vergrößerungswechsler von 6x bis 40x.

Die Helligkeitsregelung erfolgt direkt an der Gerätebasis.

Die SL-85V ist bereits vorbereitet zur Aufnahme eines DigiPro Kameramoduls. Dafür bietet sie serienmäßig einen Joystick-auslöser und eine R/L Erkennung in der Gerätebasis.

bon SL-75 V

Dieses Modell ist das universelle ophthalmologische Arbeitsgerät und ist weltweit bei vielen Augenärzten im Einsatz.

Auch die SL-75V bietet eine moderne LED Beleuchtung, einen 5-fach Vergrößerungswechsler bis 40-fach und lässt sich leicht zu einer digitalen Spaltlampe aufrüsten.

Die klassische H-Typ Ausführung mit Beleuchtung von oben erlaubt eine horizontale Dezentrierung des Spalts von $\pm 4^\circ$ auf 0° bezogen (Spaltentkopplung).



bon SL-99K Elite

Die Spaltlampen der exklusiven "Elite" Serie sind die Topmodelle der bon Spaltlampen-Familie. Aus über 40 Jahren Erfahrung in der Ophthalmologie entstanden modernste Arbeitsgeräte der Premiumklasse, die Ihre tägliche Arbeit leichter und ergonomischer machen.

Sie überzeugen - zusätzlich zu den Eigenschaften der SL-75V - durch fühlbar optimierte Mechaniken mit einzigartiger Leichtläufigkeit und sanften Rastungen. Ihre ausgezeichnete, mehrfach vergütete Optik garantiert höchste Tiefenschärfe bei der Untersuchung. Die SL-99K Elite bietet außerdem eine regelbare Irisblende.

Ein optimiertes „Mizar“ **Kameramodul** gehört zum Standard Lieferumfang der SL-99K Elite. Ihr Joystick bietet neben dem Auslöseknopf einen cleveren, frei programmierbaren Doppelschalter, z.B. zur Einstellung der elektronische Blende (Shutter). Die Haupt- und Umfeldbeleuchtung regeln Sie ganz bequem direkt an der Gerätebasis. Sie können somit alle Funktionen steuern, ohne die Hände von der Spaltlampe nehmen zu müssen.

Mit der SL-99K Elite können Sie übrigens auch ohne weiteres Zubehör Meibographien durchführen.

DigiPro macht Qualität sichtbar.

Die Spaltlampen SL-85V und SL-75V sind bereits serienmäßig mit einem Auslöser im Joystick und einer automatischen R/L-Erkennung ausgestattet. Zusammen mit dem „Mizar“ Kameramodul wird daraus im Handumdrehen eine vollwertige DigiPro. *)

Die DigiPro ist seit vielen Jahren weltweit die erfolgreichste digitale Spaltlampe, mittlerweile in der fünften Technologie-Generation.

Die Kamera besitzt einen professionellen 3/4 Zoll Chip, der speziell für die Ophthalmologie entwickelt wurde. Er liefert überlegene Transmissionswerte gegenüber einem konventionellen Strahlenteiler. Eine Umfeldbeleuchtung gehört zum Lieferumfang.

Ein automatischer Weißabgleich gewährleistet eine besonders farbgetreue Bildwiedergabe.

Der fortschrittliche „Selective Sharpness“-Algorithmus minimiert Bildrauschen und sorgt für Detailverbesserung bei hohen Vergrößerungen. Die clevere Multi-Shot-Funktion hilft Ihnen dabei, immer das gewünschte Motiv festzuhalten.



Die DigiPro kann über eine professionelle DICOM Schnittstelle in alle gängigen Praxisanwendungen eingebunden werden. Eine moderne USB 3.0 Schnittstelle garantiert dabei schnelle Datenübertragung und eine hohe PC-Kompatibilität.

Erleben Sie Fotos, Videos und Fullscreen-Livebilder in unvergleichlicher Detailschärfe. Selbst anspruchsvolle Endothel- und Fundus-Aufnahmen sind ohne Blitz möglich.

- einfach auf Knopfdruck!




*) Beim Topmodell SL-99K Elite gehört ein optimiertes „Mizar“ Kameramodul zum festen Lieferumfang.

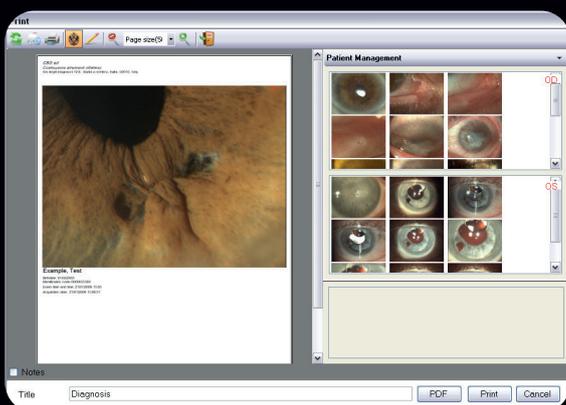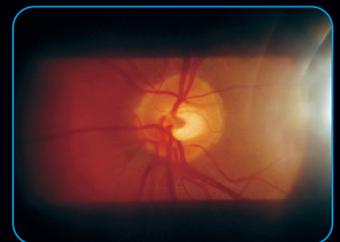

Die Phoenix Software

Zum Kameramodul gehört die hochentwickelte „Phoenix“ Software. Ihre netzwerkfähige Datenbank ist unbegrenzt und verspricht eine bequeme Verwaltung Ihrer Aufnahmen. Die integrierte Bildbearbeitung ermöglicht komfortables Markieren, Zeichnen, Kommentieren und Messen direkt im Bild. Bis zu 6 Bilder lassen sich übersichtlich miteinander vergleichen - optimal für Dokumentation und Verlaufskontrolle. Phoenix erlaubt außerdem ein perfektes Zusammenspiel der DigiPro mit Funduskamera, Topographiesystem, Scheimpflugkamera, Vorderabschnitts-OCT und Endothelkamera, die alle mit der gleichen Software arbeiten.

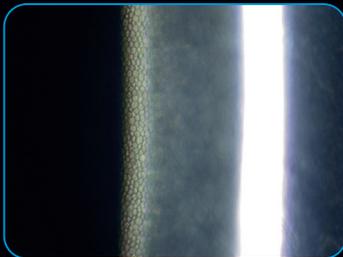

Technische Details SL-85V / SL-75V / SL-99K Elite

optisches System	konvergentes Galilei-Vergrößerungswechsler-System
Stereowinkel	6°
Okulare	12,5x - geeignet für Brillenträger
Ametropieausgleich	±8 D
Vergrößerungen	6x 10x 16x 25x 40x
Entsprechende Realvergrößerung	5,6x 8,5x 14,8x 25,6x 39,3x
Sichtfeld	41 mm bis 5,7 mm
Pupillendistanz	50 mm bis 80 mm
integrierter Sperrfilter	Gelb
Lichtquelle	weiße LED
Farbtemperatur	3.100 K
R/L Erkennung	in der Gerätebasis integriert
Auslöser für DigiPro Kamera	Knopf im Joystick integriert
DigiPro Kameramodul „Mizar“	PC-Anschluss USB 3.0
	Auflösung 5MP (2.448x2.048 px)
	Bildrate 35 fps
	Pixelgröße 3,45 x 3,45 µm ²

SL-85V

SL-75V

SL-99K Elite

Lichtstärke	max. 284.000 Lux	max. 284.000 Lux	max. 220.000 Lux
Spaltprojektion	1,33x	1x	1,25x
Spaltbreite (stufenlos einstellbar)	0 – 15 mm	0 – 12 mm	0 – 15 mm
Spaltlänge (stufenlos einstellbar)	1 – 15 mm	1 – 12 mm	1 – 15 mm
Blenden	15, 9, 5,5, 0,3 mm	12, 9, 5, 3, 1, 0,2 mm	15, 10, 5, 3, 1, 0,2 mm
Filter	Blau, Rot, Grün (Rotfrei)	Blau, Rot, ND 50%, Grün (Rotfrei)	Blau, Rot, ND 50%, Grün (Rotfrei)
Spaltdrehung	± 90° stufenlos, im TABO-System	± 90° stufenlos, im TABO-System	± 90° stufenlos, im TABO-System
Spaltwinkel	0° horizontal (fix)	0° 5° 10° 15° 20° variabel	0° 5° 10° 15° 20° variabel
Rotationsintervall der Spaltprojektion	±90°, Winkelskala, Referenz bei 0°	±90°, Winkelskala, Referenz bei 0° und ±10°	±90°, Winkelskala, Referenz bei 0° und ±10°
Arbeitsabstand	69,5 mm	80 mm	80 mm
Abmessungen (HxBxT)	440 x 313 x 335 mm	675 x 313 x 335 mm	675 x 313 x 335 mm
Gewicht (ohne Kamera)	7,4 kg	7,8 kg	7,8 kg
Betriebsspannung	15V DC 1A	15V DC 1A	24V DC 1A

optionales Spaltlampen-Zubehör



Applanationstonometer

Unsere Spaltlampen-Tonometer nach Goldmann garantieren höchste Präzision und überzeugen mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie verwenden die üblichen Standard-Messprismen, die natürlich auch als praktische Einmalprodukte erhältlich sind.

iCare ST500™

Die Revolution in der IOD-Messung

Das ST500™ von iCare bringt die bewährte Rebound-Technologie direkt an Ihre Spaltlampe. Die sanfte Messung ist kaum spürbar und erfordert weder Anästhesie noch Farbstoff. Das spart Zeit und erhöht den Patientenkomfort erheblich.

Der Quick-Modus ermöglicht auch bei schwieriger Compliance schnelle und präzise Messungen und optimiert damit spürbar den Workflow. Sie erhalten stets zuverlässige, wiederholbare Ergebnisse mit einer hohen Messgenauigkeit und einer hervorragenden Übereinstimmung mit der Applanationstonometrie (GAT).



ergonomischer Schrägeinblick

Dieser Okularadapter ist ideal für besonders groß gewachsene Anwender. Er verspricht Ihnen ein entspanntes Arbeiten ohne Nackenschmerzen. Der Einblickswinkel beträgt 20°. Das Winkelstück kann leicht an alle aktuellen **bon** Spaltlampenmodelle montiert werden.

Polaris

Das "TearScope" der nächsten Generation

Als praktische Ergänzung Ihrer Spaltlampe erweitert Polaris Ihre diagnostischen Möglichkeiten auf einfache Weise: Mit seiner LED-Kaltlichtquelle ermöglicht es Ihnen interferometrische Analysen der Lipidschicht des Tränenfilms sowie die Kontrolle der cornealen Oberfläche. Das Polaris wird dafür einfach auf die Spaltlampenbasis aufgesteckt.



C.S.O. S.r.l., Via degli Stagnacci 12/E, 50010, Badia a settimo (FI), Italy
iCare ST500: Icare Finland Oy, Äyritie 22, 01510 Vantaa, Finland

Rev. 2025-04-07

bon Optic Vertriebsgesellschaft mbH

Stellmacherstr. 14 · 23556 Lübeck · Telefon 0451 - 80 9000
Fax 0451 - 80 900-10 · E-Mail call@bon.de · Internet www.bon.de

bon